

**Miele**

Im Dienst der Hygiene.  
Die Miele Steckbeckenspüler für Kliniken.

**Miele Professional. Immer Besser.**



# Qualität von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen



Miele Professional steht von jeher für höchste Zuverlässigkeit bei allen hygiene-kritischen Anwendungen. Unsere Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sind gefragte Leistungsträger bei der medizinischen Instrumentenaufbereitung, während sich unsere Hygiene-Waschmaschinen und Frischwasser-Spülmaschinen im fordernden Arbeitsalltag von Kliniken bewähren. Die neuen Miele Steckbeckenspüler ergänzen das Angebot perfekt und unterstützen im stressigen Arbeitsalltag. Im Dienste der Hygiene.

## Qualität

Die sprichwörtliche Miele Qualität verdankt ihren ausgezeichneten Ruf wesentlich einer langlebigen Konstruktion mit hochwertigen Materialien. So sind die neuen Miele Steckbeckenspüler konsequent aus Edelstahl und ausgesuchten Komponenten gefertigt. Qualität umfasst bei Miele Professional aber noch weitere Aspekte. Dazu zählen praxisgerechte Details für eine zügige, hygienisch sichere Beladung sowie die ergonomischen Bedienelemente, aber auch die problemlose Aufstellung selbst in Räumen mit stark eingeschränktem Platzangebot.

## Effizienz

Mit den neuen Steckbeckenspülem von Miele Professional entscheiden Sie sich für eine besonders ressourcenschonende und damit auch wirtschaftliche Lösung. Das leistungsstarke Düsensystem bewirkt eine gründliche Reinigung des Spülguts bei einem minimalen Verbrauch von Wasser, Energie und Prozesschemikalien. Auch die robuste und wartungsarme Konstruktion macht die Steckbeckenspüler zu einer rationellen Investition, die sich Jahr für Jahr bezahlt macht.

## Leistung

Miele Steckbeckenspüler entfernen zuverlässig sämtliche Anschmutzungen von Steckbecken oder Urinflaschen, ob aus Edelstahl oder Kunststoff. Ermöglicht wird diese Gründlichkeit durch eine innovative Anordnung fester und rotierender Düsen sowie bedarfsgerechter Spülprogramme.

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Leistung und Qualität. Hochwertige Geräte, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen, begründen das große Vertrauen professioneller Anwender: 97% aller Kunden\* würden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

## Verlässlichkeit

Seit vier Generationen tragen wir als familiengeführtes Unternehmen eine besondere Verantwortung für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und Mitarbeiter, unsere Produkte und Verfahren sowie für die eingesetzten Ressourcen.

- Konsequenz auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktentwicklung
- Branchenprägende Innovationen „Made in Germany“
- Mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichnetes Produktdesign
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Servicestärke mit einem reaktionsschnellen Netz von Kundendiensttechnikern

**55**  
JAHRE Medizintechnik



\*Befragung durch das unabhängige Institut „Mercuri International“

# Steckbeckenspüler von Miele Professional

Höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz



## Sicherung der Hygiene

Miele Steckbeckenspüler sind darauf ausgelegt, die Verschleppung von Krankheitserregern zu unterbinden – und schützen auf diese Weise nicht nur Klinikpatienten, sondern auch das Personal. So führen die Maschinen im Anschluss an die Reinigung eine thermische Desinfektion des Spülguts durch, entsprechend den aktuellen Richtlinien und Empfehlungen, und gewährleisten so die Einhaltung höchster Hygienestandards.

## Schutz und Effizienz


Hygienesicherheit wird bei den Miele Steckbeckenspülern auf mehreren Ebenen erzielt. Die völlig glatten Edelstahloberflächen mit minimalen Spaltmaßen sind besonders leicht zu reinigen, während die Konstruktion des Spülraums ohne Schweißnähte dem Anhaften von Rückständen entgegenwirkt. Modellabhängig steigern Taster zur Ellbogenbedienung oder die (semi-)automatische Türöffnung den Hygieneschutz zusätzlich.

## Mehr Bedienkomfort durch praktisches Zubehör

Unterschiedliche Beladungsträger stehen zur Wahl. Dadurch kann eine große Vielfalt an Spülgut aufbereitet werden. Ausgussbecken mit manueller oder automatischer Randspülung ergänzen das System perfekt.

# Produktvorteile im Überblick

Miele Steckbeckenspüler Serie PWD 854x

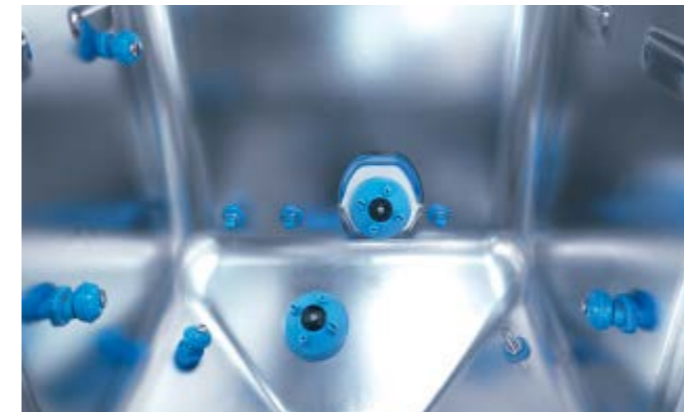

## Hochentwickeltes Reinigungs- und Desinfektionssystem

- Spülsystem mit Multijet-Rotationsdüse (typabhängig)
- Mehrere rotierende und fixierte Düsen garantieren eine Wasser- und Chemikalienverteilung ohne Spülschatten
- Sämtliche Außen- und Innenflächen des Spülguts werden benetzt und mit reproduzierbarer Effektivität gereinigt
- Spülkammer und Maschinenverkleidung bestehen aus Edelstahl
- Spülkammer ohne Schweißnähte und mit gerundeten Ecken wirkt der Bildung von Rückständen und der Keimverschleppung entgegen
- Thermische Desinfektion der Spülkammer und des Düsen systems bei jedem Programmdurchlauf



## Intelligente Steuerung

- Permanente Maschinenüberwachung und aktuelle Statusanzeige
- Individuelle Anpassung der Spülprogramme und Spülparameter an die Kundenerfordernisse
- Drei Spülprogramme für unterschiedliche Anschmutzungen
- Einfache Bedienung über Direktwahltasten
- Klartextdisplay zeigt alle relevanten Daten an, z. B. Name und Status des laufenden Programms, verbleibende Programmlaufzeit, erreichter A0-Wert, maximale Spültemperatur (typabhängig)



## Automatische Türfunktionen

- Automatisierte Türbedienung verfügbar für alle Modelle: Fußschalter zur Bedienung ohne Handkontakt
- Kontaminiertes Spülgut wird in ergonomischer Arbeitshöhe in die Maschine geladen (typabhängig)
- Zusätzliche Steigerung von Bediensicherheit und Ergonomie
- Automatische Verriegelung des Spülraums bei Programmstart



# Steckbeckenspüler PWD 8541

PWD 8541 MD, PWD 8541 AD



Bestückungsbeispiele

**PWD 8541 MD**  
als Untertischgerät, mit manueller  
Türöffnung/-schließung

**PWD 8541 AD**  
als Untertischgerät, mit automatischer  
Türöffnung/-schließung

### Produktbesonderheiten

- H 850, B 600, T 600 mm
- Leistung/Charge bis zu 1 Steckbecken und 1 Urinflasche oder 4 Urinflaschen\*
- Einfache Bedienung – Direktwahltasten
- Bedarfsgerechtes Desinfektionslevel – einstellbarer A0-Wert
- Einfache Aufstellung auf engstem Raum – kompakte Außenmaße
- Kundenspezifische Programmanpassung – Programmierbare Steuerung

\* Die Kapazität hängt von der Art der zu spülenden Güter ab und kann abweichen. Verschiedene Kombinationen aus Urinflaschen und Steckbecken sind möglich.



# Steckbeckenspüler PWD 8545

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD



Bestückungsbeispiele

**PWD 8545 MD**  
als Standgerät, mit manueller  
Türöffnung/-schließung

**PWD 8545 SAD**  
als Standgerät, mit automatischer  
Türöffnung mittels Fußschalter und  
manueller Türschließung

**PWD 8545 AD LCD**  
als Standgerät mit automatischer  
Türöffnung/-schließung und LCD Display

### Produktbesonderheiten

- H 1630, B 545, T 475 mm
- Leistung/Charge bis zu 1 Steckbecken und 1 Urinflasche, oder 3 Urinflaschen\*
- Einfache Bedienung – Direktwahltasten
- Bedarfsgerechtes Desinfektionslevel – einstellbarer A0-Wert
- Optimale Spülergebnisse – Multijet Rotationsdüse
- Kundenspezifische Programmanpassung – Programmierbare Steuerung

\* Die Kapazität hängt von der Art der zu spülenden Güter ab und kann abweichen. Verschiedene Kombinationen aus Urinflaschen und Steckbecken sind möglich.



# Steckbeckenspüler PWD 8546

PWD 8546 SAD



**PWD 8546 SAD**  
als Standgerät, mit automatischer Türöffnung mittels Fußschalter und manueller Türschließung

### Produktbesonderheiten

- H 1460, B 540, T 600 mm
- Leistung/Charge bis zu 1 Steckbecken und 1 Urinflasche, oder 4 Urinflaschen\*
- Einfache Bedienung – Programmauswahl via Ellenbogen
- Bedarfsgerechtes Desinfektionslevel – einstellbarer A0-Wert
- Sichere Aufbewahrung der Prozesschemie – Stauraum für Kanister
- Kundenspezifische Programmanpassung – Programmierbare Steuerung

\* Die Kapazität hängt von der Art der zu spülenden Güter ab und kann abweichen. Verschiedene Kombinationen aus Urinflaschen und Steckbecken sind möglich.

Bestückungsbeispiele



# Steckbeckenspüler PWD 8549

PWD 8549 AD



**PWD 8549 AD**  
als Standgerät, mit vollautomatischer Glas-Hubtür

### Produktbesonderheiten

- H 1750, B 600, T 610 mm
- Leistung/Charge bis zu 1 Steckbecken und 2 Urinflaschen\*
- Einfache Bedienung – Direktwahltasten
- Bedarfsgerechtes Desinfektionslevel – einstellbarer A0-Wert
- Optimale Spülergebnisse – Multijet Rotationsdüse
- Kundenspezifische Programmanpassung – Programmierbare Steuerung
- Platzsparende Lösung durch senkrechte Türbewegung

\* Die Kapazität hängt von der Art der zu spülenden Güter ab und kann abweichen. Verschiedene Kombinationen aus Urinflaschen und Steckbecken sind möglich.

Bestückungsbeispiele



# Technische Daten

## Steckbeckenspüler, Ausgussbecken



Steckbeckenspüler	PWD 8541 MD, 8541 AD	PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD
Urinflaschen pro Charge max.	4	3
Steckbecken/Urinflaschen pro Charge	1/1	1/1
Programme	3	3
Außenmaße H/B/T [mm]	850/600/600	1630/545/475
Dosierpumpe für Entkalker	•	•
Wasseranschlüsse	KW / WW	KW / WW
Ablauf	Wandablauf, umbaubar	Wandablauf, umbaubar
Elektroanschluss	3N AC 380-400V 50Hz, 1 AC 230V 50Hz	3N AC 380-400V 50Hz, 1 AC 230V 50Hz



Steckbeckenspüler	PWD 8546 SAD	PWD 8549 AD
Urinflaschen pro Charge	4	2
Steckbecken/Urinflaschen pro Charge max.	1/1	1/2
Programme	3	3
Außenmaße H/B/T [mm]	1460/540/600	1750/610/600
Dosierpumpe für Entkalker	•	•
Wasseranschlüsse	KW / WW	KW / WW
Ablauf	Wandablauf, umbaubar	Wandablauf, umbaubar
Elektroanschluss	3N AC 380-400V 50Hz, 1 AC 230V 50Hz	3N AC 380-400V 50Hz, 1 AC 230V 50Hz



Ausgussbecken	APWD 075	APWD 076	APWD 077	APWD 078
Wasseranschluss für manuelle Spülung	•	-	•	-
Wasseranschluss für automatische Spülung	-	•	-	•
Geeignet für Wasserhahn*	-	-	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	590/500/600	590/500/600	590/500/700	590/500/700

\* Wasserhahn ist nicht im Lieferumfang enthalten.





Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Str. 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh

## Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644  
Telefax 0800 33 55 533  
Mo. - Fr.. 8:00 - 17:30 Uhr

info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de

### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

### Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download